

MASÁŽNÍ PISTOLE

návod k použití



Model: GLOX V1

Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Vážíme si vaší důvěry a doufáme, že budete s naším výrobkem spokojeni. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí potřeby.

Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům, které jsou klíčové pro bezpečné a správné používání produktu.

Pokud máte k přístroji jakékoli dotazy nebo připomínky, neváhejte se obrátit na naši zákaznickou linku. Jsme tu pro vás a rádi vám pomůžeme.

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt.


Údržba

1. **Povrch zařízení otřete jemně vlhkým ručníkem** a následně jej osušte měkkým hadříkem. Tím zajistíte, že na povrchu nezůstanou žádné stopy vlhkosti.
2. **Při dlouhodobém skladování nebo cestování uložte produkt do původní krabice.** Dbejte na to, aby zařízení zůstalo suché, což pomůže ochránit jej před poškozením a zachovat jeho funkčnost.

Varování

- Použijte speciálně přibaleny USB kabel s 5V napájecím adaptérem pro nabíjení produktu.
- Nepoužívejte nabíječku s poškozeným krytem nebo nesprávným napětím, aby nedošlo k poškození jednotky.
- Nedotýkejte se nabíjecího kabelu a adaptéru mokřýma rukama a netahejte za kabel při odpojování nabíječky.
- Vyvarujte se kontaktu s produktem nebo nabíječkou mokřýma rukama, abyste předešli zkratu, poruše nebo úrazu elektrickým proudem.
- Přestaňte používat adaptér, pokud je vystaven dešti, kapalině nebo je silně vlhký.
- Tento produkt není určen pro lékařské účely, slouží pouze k osobní masáži.
- Určité osoby, jako jsou ty s kardiostimulátorem, srdečními chorobami, těhotné ženy, osoby s onemocněním zad, zlomeninami, osteoporózou, kloubními onemocněními, zhoubnými nádory, kožními poraněními nebo ekzémem, s cukrovkou s komplikacemi, jako je neuropatie nebo poškození sítnice, nedávná operace, epilepsie nebo migrény, hernie plotének, spondylolistéza, spondylolýza nebo spondylóza, nedávná náhrada kloubů, nitroděložních tělísek, kovových čepů nebo destiček nebo pokud existují jakékoli obavy o vaše fyzické zdraví by neměly produkt používat. Pokud máte zdravotní potíže, konzultujte použití s lékařem.
- Nevystavujte baterii vysokým teplotám nebo blízko topných zařízení, jako je sluneční záření nebo topidla, aby nedošlo k přehřátí a výbuchu.
- Nerozebírejte ani neupravujte baterie, nekládejte cizí předměty a neponořujte je do vody, aby nedošlo k úniku, přehřátí, požáru nebo výbuchu.
- Baterie by měly být bezpečně zlikvidovány v souladu s platnými předpisy.
- Nedovolte dětem nebo osobám bez autonomie obsluhovat a používat tento produkt. Umístěte jej mimo dosah dětí.
- Používejte pouze na suchém a čistém povrchu. Lze použít přes oblečení, jemně přitlačte a pohybujte po kůži, maximálně 60 sekund na každou část.
- Nepoužívejte na vrcholu hlavy nebo na tvrdých částech těla s kostmi. Pokud necítíte bolest nebo nepohodlí, používejte pouze na měkké tkáně těla.
- Nepoužívejte v oblastech s modřinami, bolestí nebo nepohodlím.
- Nestůjte ani nesedejte přímo na výrobek, aby nedošlo k pádu.
- Nadměrné používání může způsobit přehřátí a zkrátit životnost produktu. Nechte výrobek vychladnout před opakovaným použitím.
- Nepoužívejte ve vlhkém prostředí, jako je koupelna, a nekládejte produkt do vody nebo jiných kapalin, aby nedošlo ke zkratu nebo úrazu elektrickým proudem.
- Neumísťujte výrobek blízko zdrojům tepla, nebo na přímém slunečním světle.
- Nepoužívejte přístroj během bouřky.
- Nekládejte ani neupouštějte předměty do žádných otvorů výrobku.
- Nepřikrývejte masážní přístroj během používání, aby nedošlo k poruše způsobené zvýšením teploty motoru.
- Nedovolte, aby se prsty, vlasy nebo jiné části těla přiblížily k hřídeli a zadní části vibrační hlavy, aby nedošlo k jejich zachycení.

Indikace funkce

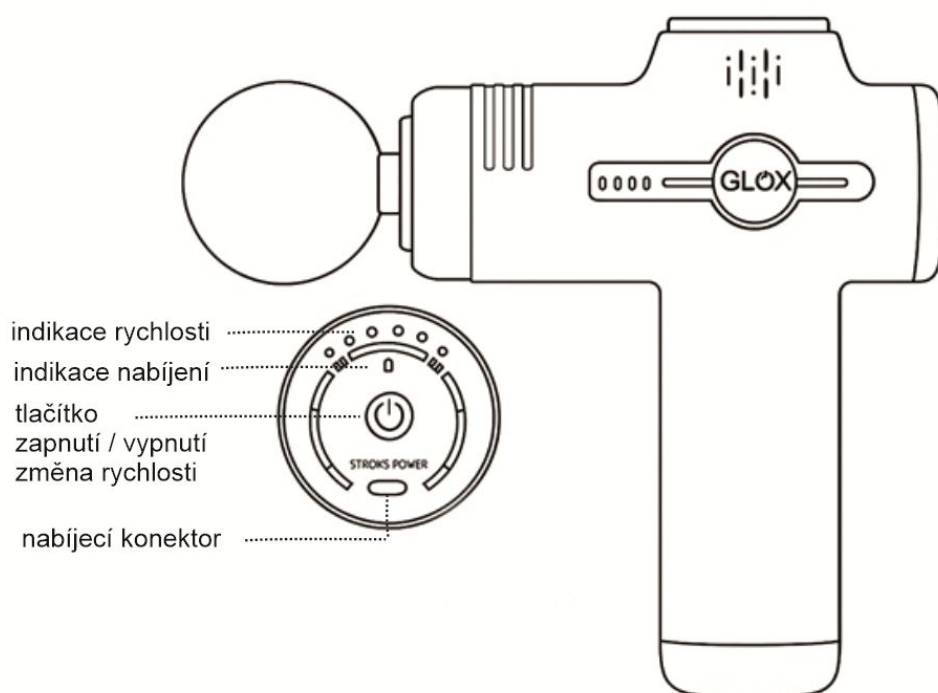

Funkce

- **Zapnutí:** Stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí. Po rozsvícení kontrolky se stroj aktivuje a proces zapnutí je dokončen.
Přepínání rychlostí: Po zapnutí stroje můžete krátkým stisknutím tlačítka zapnutí zvýšit rychlost. Stroj postupně zvyšuje výkon od rychlosti 1 až po rychlost 6.
- **Vypnutí:** Pokud je stroj nastaven na 6. rychlostní stupeň, krátkým stisknutím tlačítka zapnutí jej vypnete. Alternativně, v jakémkoli rychlostním stupni, můžete stroj vypnout tak, že stisknete a podržíte tlačítko zapnutí. Kontrolka zhasne, čímž je proces vypnutí dokončen.

Pokyny k baterii

- **Doba nabíjení:** Pro plné nabití baterie, která je zcela vybitá, je doporučeno nabíjet přibližně **3 hodiny**.
- **Výdrž zařízení:** Závisí na úrovni tlaku během používání, což ovlivňuje, jak dlouho zařízení vydrží na jedno nabití.
- **Nabíjecí příslušenství:** Použijte **speciálně vybavený nabíjecí kabel** dodávaný se zařízením. Připojte jej k **5V adaptéru**, který splňuje národní standardy a jehož výkon nepřesahuje **15W**.
- **Indikace nabíjení:**
 - **Model s jedním tlačítkem (šest rychlostí):** Při nabíjení svítí nabíjecí displej **červeně**. Po úplném nabití červené světlo **zhasne**.
 - **Model LCD se dvěma tlačítky:** Když je baterie vybitá, indikátor signalizuje potřebu nabití. Během nabíjení svítí indikátor **rovnoměrně** a při plném nabití svítí **zcela**.
 - **Model se třemi tlačítky:** Při nabíjení bliká světlo na displeji **skákavým způsobem**. Nabíjení je dokončeno, když úroveň baterie ukazuje **"-"**.
- **Bezpečnostní upozornění:** **Nezapínejte zařízení** během nabíjení, aby byla zajištěna vaše bezpečnost.

Parametry produktu

Model	V1
Jmenovité napětí	7,4V
Jmenovitý výkon	18W
Nabíjecí napětí	5V
Nabíjecí proud	2A
Kapacita baterie	1200mAh
Doba nabíjení	2-3 hodiny
Výdrž baterie	4-6 hodin
Nastavitelné úrovně	6 úrovní
Hmotnost	850g

Obsah balení

- Masážní pistole GLOX 750
- 6 masážní nástavce
- Kabel USB

POPIS A VYUŽITÍ MASÁŽNÍCH HLAVIC



Nástavec "T"

Procvičování a relaxace břišních svalů, paží a stehenní linie



Nástavec Nábojnice

vhodné pro masáž hlubokých tkání, jako jsou meridiány, klouby, dlaně, chodidla



Nástavec Malá kulička

vhodné pro hloubkovou masáž meridiánových akupunkturních bodů k uvolnění



nástavec Kulička

vhodné pro masáž paží a dolní části zad, velkých svalových skupin, jako jsou hýždě, stehna a lýtka



Nástavec "Y"

vhodné pro masáž krku souběžně na obou stranách páteře a pro masáž Achillovy šlachy



Nástavec Plochý

vhodné pro masáž celého těla s uvolněním svalů

Řešení problémů

Model	Jev	Důvod	Řešení problémů
V1	přístroj nejde zapnout	Ochrana proti přetížení baterie	Připojte nabíjecí kabel k napájení zařízení a nabijte baterii

WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Záruční podmínky:

Na výrobek se vztahuje záruka 2 roky. Pro uplatnění záruky je důležité dodržet následující podmínky:

- Opravy a servis: V případě potřeby opravy nebo jiného servisu během záruční doby se obraťte přímo na prodejce výrobku. Je nezbytné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.
- Podmínky, za kterých nelze reklamaci uznat:
 - Nesprávné použití: Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je určen, nebo nedodržení pokynů pro údržbu, provoz a servis.
 - Poškození: Poškození způsobené živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanickým poškozením vinou kupujícího (např. při přepravě nebo čištění nevhodnými prostředky).
 - Opotřebení: Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterie).
 - Vnější vlivy: Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření, elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny nebo předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí, nevhodná polarita napětí, chemické procesy a podobně.
 - Úpravy a modifikace: Jakékoliv úpravy, modifikace nebo změny konstrukce výrobku, které mění jeho funkce oproti zakoupené konstrukci, nebo použití neoriginálních součástí.

Dovozce: LASER CUT s.r.o.

Adresa: 4.května 2186, 755 01 Vsetín, Česká republika

✉ servis@laser-cut.cz

☎ +420 777 307 776

Prohlášení o shodě EU

Výrobce: LASER CUT s.r.o.

4. května 2186, 755 01 Vsetín Česká republika

Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce/dovozce.

Produkt: Fascial gun / Masážní pistole

Model / typ: V1 GLOX

Výše uvedený výrobek, byl testován v souladu s normami použitými prokázání shody se základními požadavky stanovenými ve směrnících.

Directive (EU) 2011/65/EU & EU 2015/863

Příslušné harmonizované normy, na které se vztahuje shoda, jsou:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN 60335-1:2012+A15:2021

EN 62233:2008

EN IEC 60335-2-32:2021

Tento produkt nese označení CE:



Podepsán:

Jméno a funkce:

Datum a místo:

Robert Fiala, Jednatel společnosti
2. Dubna, 2025 - Vsetín

Podpis:

The image shows a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Fiala'.