

GLOX W8

masážní pistole



návod k použití

Děkujeme, že jste si vybrali spotřebič značky GLOX.

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Vážíme si vaší důvěry a doufáme, že budete s naším výrobkem spokojeni. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí potřebu. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům, které jsou klíčové pro bezpečné a správné používání produktu. Pokud máte k přístroji jakékoliv dotazy nebo připomínky, neváhejte se obrátit na naši zákaznickou linku. Jsme tu pro vás a rádi vám pomůžeme.

POKYNY K BATERII

Doba nabíjení: Když je baterie vybitá, je třeba ji nabíjet přibližně 3 hodiny, aby se plně nabila.

Životnost baterie: Životnost jedné baterie závisí na síle tlaku, která se může během používání lišit.

Doba používání: Závisí na úrovni tlaku během používání.

Nabíjecí zařízení: Při nabíjení baterie použijte speciálně přiložený nabíjecí kabel určený pro tento přístroj. Ujistěte se, že spolupracuje s 5V napětím, které splňuje požadované standardy.

Adaptér: Používejte 15W adaptér pro nabíjení zařízení.

Zobrazení nabíjení: Během nabíjení se na displeji zobrazuje aktuální úroveň nabití baterie.

Signalizace nabíjení: U třítláčkového modelu bliká světlo na displeji během nabíjení.

Dokončení nabíjení: Když baterie zobrazuje symbol „100%“, nabíjení je dokončeno. Pro vaši bezpečnost nezačínajte nabíjení znovu.

Před prvním použitím nabijte baterii na 100%.

NÁVOD K POUŽITÍ

Upozornění: Je důležité mít na paměti, že při jakémkoli cvičení nebo terapeutické aktivitě existuje riziko fyzického zranění. Každý cvičební program, včetně tohoto, může způsobit úraz. Před zahájením tohoto nebo jakéhokoli jiného cvičebního či terapeutického programu se doporučuje konzultace s lékařem. Před použitím vložte masážní hlavu do předního otvoru zařízení.

Hlubková masáž může rychle zmírnit bolest, burzitidu, svalové křeče, neuralgii a další onemocnění kosterního svalstva. Téměř všechna onemocnění měkkých tkání souvisejí s traumatem, nadměrným používáním svalů nebo abnormálním držení těla.

Opatření při používání:

Vyvarujte se nadměrnému tlaku a dlouhodobé fyzikální terapii.

Vyhýbejte se citlivým oblastem, jako je hlava, obličej a krční páteř.

Pokud se objeví zánět, otok nebo zhoršení bolesti, okamžitě přestaňte zařízení používat.

Současný výzkum se zabývá se účinkem vibračního tréninku na specifické lékařské nemoci, což může snížit počet kontraindikací.

Kombinace vibračního tréninku s fyzikální terapií je často doporučována, ale měla by být prováděna na základě rady nebo v přítomnosti lékaře, specialisty nebo fyzioterapeuta. Správná regenerace a odpočinek jsou klíčové pro odstranění svalové únavy a obnovu síly. používáním svalů nebo abnormálním držení těla.

FUNKCE

Přepínání rychlosti:

Zvýšení rychlosti: Ve stavu pohotovosti stiskněte tlačítko  čímž zapnete pistoli na první rychlost. Dalším dotykem, vždy zvýšíte rychlost o jeden stupeň. Celkem je k dispozici 6 rychlostí.

Zobrazení napájení:

Aktuální stav napájení: Dolní procenta ukazují aktuální stav napájení, kde plné napájení je 100%. Hodnota se mění podle spotřeby energie. Pokud se zobrazují jen červeným 25%, znamená to, že výkon stroje je nedostatečný a je třeba jej nabít.


Zapnutí / Vypnutí zařízení:

Když je přístroj v provozu, po sedmém dotyku se přístroj, vypne na 0 rychlost. Úplné vypnutí přístroje zespodu ON/OFF.

Funkce časové ochrany:

Automatické vypnutí: Stroj má funkci časové ochrany, která způsobí automatické vypnutí každých 15 minut. Pokud potřebujete zařízení znovu použít, prosím, restartujte jej.

INDIKACE FUNKCE

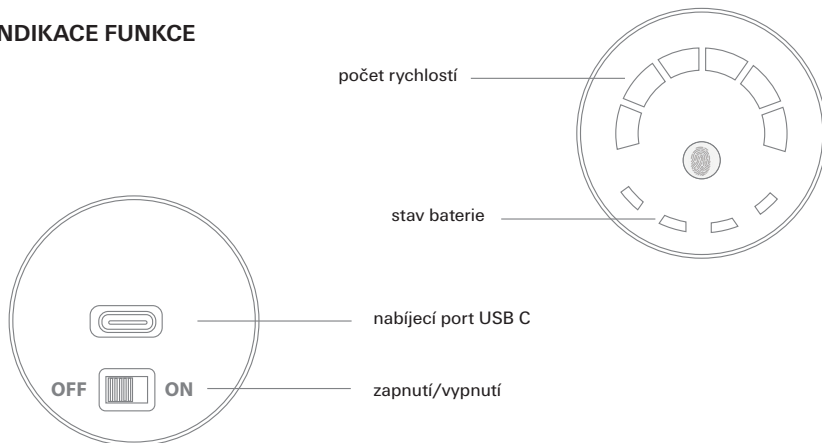

A BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

- Použijte speciálně přibalený USB kabel s 5V napájecím adaptérem pro nabíjení produktu.
- Nepoužívejte nabíječku s poškozeným krytem nebo nesprávným napětím, aby nedošlo k poškození jednotky.
- Nedotýkejte se nabíjecího kabelu a adaptéru mokřými rukama a netahejte za kabel při odpojování nabíječky.
- Vyvarujte se kontaktu s produktem nebo nabíječkou mokřými rukama, abyste předešli zkratu, poruše nebo úrazu elektrickým proudem.
- Přestaňte používat adaptér, pokud je vystaven dešti, kapalině nebo je silně vlhký.
- Tento produkt není určen pro lékařské účely, slouží pouze k osobní masáži.
- Určité osoby, jako jsou ty s kardiostimulátorem, srdečními chorobami, těhotné ženy, osoby s onemocněním zad, zlomeninami, osteoporózou, kloubními onemocněními, zhoubnými nádory, kožními poraněními nebo ekzémem, s cukrovkou s komplikacemi, jako je neuropatie nebo poškození sítnice, nedávná operace, epilepsie nebo migrény, hernie plotének, spondylolistéza, spondylolýza nebo spondylóza, nedávná náhrada kloubů, nitroděložních tělísek, kovových čepů nebo destiček nebo pokud existují jakékoli obavy o vaše fyzické zdraví by neměly produkt používat. Pokud máte zdravotní potíže, konzultujte použití s lékařem.
- Nevystavujte baterii vysokým teplotám nebo blízko topných zařízení, jako je sluneční záření nebo topidla, aby nedošlo k přehřátí a výbuchu.
- Nerozebírejte ani neupravujte baterie, nevládejte cizí předměty a neponořujte je do vody, aby nedošlo k úniku, přehřátí, požáru nebo výbuchu.
- Baterie by měly být bezpečně zlikvidovány v souladu s platnými předpisy.
- Nedovolte dětem nebo osobám bez autonomie obsluhovat a používat tento produkt. Umístěte jej mimo dosah dětí.
- Používejte pouze na suchém a čistém povrchu. Lze použít přes oblečení, jemně přitlačte a pohybujte po kůži, maximálně 60 sekund na každou část.

- Nepoužívejte na vrcholu hlavy nebo na tvrdých částech těla s kostmi. Pokud necítíte bolest nebo nepohodlí, používejte pouze na měkké tkáni těla.
- Nepoužívejte v oblastech s modřinami, bolestí nebo nepohodlím.
- Nestůjte ani nesedejte přímo na výrobek, aby nedošlo k pádu.
- Nadměrné používání může způsobit přehřátí a zkrátit životnost produktu. Nechte výrobek vychladnout před opakovaným použitím.
- Nepoužívejte ve vlhkém prostředí, jako je koupelna, a nekládejte produkt do vody nebo jiných kapalin, aby nedošlo ke zkratu nebo úrazu elektrickým proudem.
- Neumísťujte výrobek blízko zdrojům tepla, nebo na přímém slunečním světle.
- Nepoužívejte přístroj během bouřky.
- Nevkládejte ani neupouštějte předměty do žádných otvorů výrobku.
- Nepřikrývejte masážní přístroj během používání, aby nedošlo k poruše způsobené zvýšením teploty motoru.
- Nedovolte, aby se prsty, vlasy nebo jiné části těla přiblížily k hřídeli a zadní části vibrační hlavy, aby nedošlo k jejich zachycení.

ÚDRŽBA

Povrch zařízení otřete jemně vlhkým ručníkem a následně jej osušte měkkým hadříkem. Tím zajistíte, že na povrchu nezůstanou žádné stopy vlhkosti.

Při dlouhodobém skladování nebo cestování uložte produkt do původní krabice. Dbejte na to, aby zařízení zůstalo suché, což pomůže ochránit jej před poškozením a zachovat jeho funkčnost.

SPECIFIKACE

Název produktu	Masážní pistole
Model produktu	GLOX W8
Jmenovitý výkon	18 W
Nabíjecí napětí	5V
Nabíjecí proud	2A
Kapacita baterie	1800 mAh
Doba nabíjení	2-3 hodiny
Výdrž baterie	až 6 hodin
Nastavitelné úrovně	6 úrovní
Hmotnost	770 g

OBSAH BALENÍ

- 6 typů masážních nástavců
- Masážní pistole GLOX W8
- Nabíjecí kabel USB C
- Cestovní pouzdro

POPIS A VYUŽITÍ MASÁŽNÍCH HLAVIC



Nástavec „půlměsíc“

Vhodné pro masáž hlubokých tkání jako jsou meridiánové body dlaní, chodidel, atd.



Nástavec „drápy“

Vhodné pro uvolnění měkkých tkání a citlivé pokožky



Nástavec „Y“

Vhodné pro masáž krku souběžně na obou stranách páteře a pro masáž Achillovy šlachy



Nástavec plochý

Vhodné pro masáž celého těla s uvolněním svalů



Nástavec nábojnice

Vhodné pro masáž hlubokých tkání, jako jsou meridiány, klouby, dlaně, chodidla



Nástavec kulička

Vhodné pro masáž paží a dolní části zad, velkých svalových skupin, jako jsou hýždě, stehna a lýtky



WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Na výrobek se vztahuje záruka 2 roky. Pro uplatnění záruky je důležité dodržet následující podmínky:

Opravy a servis: V případě potřeby opravy nebo jiného servisu během záruční doby se obraťte přímo na prodejce výrobku. Je nezbytné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Podmínky, za kterých nelze reklamaci uznat:

Nesprávné použití: Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je určen, nebo nedodržení pokynů pro údržbu, provoz a servis.

Poškození: Poškození způsobené živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanickým poškozením vinou kupujícího (např. při přepravě nebo čištění nevhodnými prostředky).

Opotřebení: Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterie).

Vnější vlivy: Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření, elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny nebo předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí, nevhodná polarita napětí, chemické procesy a podobně.

Úpravy a modifikace: Jakékoliv úpravy, modifikace nebo změny konstrukce výrobku, které mění jeho funkci oproti zakoupené konstrukci, nebo použití neoriginálních součástí.

Dovozce: LASER CUT s.r.o., 4.května 2186, 755 01 Vsetín.

4.května 2186, 755 01 Vsetín

servis@laser-cut.cz

+420 777 307 776

.....

Prohlášení o shodě EU

Výrobce: LASER CUT s.r.o.

4. května 2186, 755 01 Vsetín Česká republika

Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce/dovozce.

Produkt: Fascial gun/Masážní pistole

Model/typ: **W8 GLOX**

Výše uvedený výrobek, byl testován v souladu s normami použitými prokázání shody se základními požadavky stanovenými ve směrnících.

Directive (EU) 2011/65/EU & EU 2015/863

Příslušné harmonizované normy, na které se vztahuje shoda, jsou:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN 60335-1:2012+A15:2021

EN 62233:2008

EN IEC 60335-2-32:2021

Tento produkt nese označení CE:

Podepsán:

Jméno a funkce:

Datum a místo:

CE

Robert Fiala, Jednatel společnosti

2. dubna, 2025 - Vsetín

Podpis 

Vysvětlení symbolů:

Na přístroji, v návodu k použití, na obalu a typovém štítku přístroje mohou být použity následující symboly:

	Nebezpečí! Přístroj se nesmí používat ve vodě ani v její blízkosti (umyvadlo, sprcha, vana) - nebezpečí zásahu elektrickým proudem.		Značka pro identifikaci obalového materiálu: A - zkratka materiálu B - číslo materiálu 1-7 plasty 20-22 papír a lepenka
	Přečtěte si pokyny.		Informace o výrobku Upozornění na důležité informace.
	Likvidace podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)		Označení CE Tento výrobek splňuje požadavky platných evropských a národních směrnic.
	Baterie s obsahem škodlivých látek nepatří do domovního odpadu.		Značka posuzování shody pro Velkou Británii
	Výrobce		Symbol dovozce

	Součásti obalu roztřídte a zlikvidujte je v souladu s místními předpisy.		Produkt a součásti obalu roztřídte a zlikvidujte je v souladu s místními předpisy.
	Výrobky prokazatelně odpovídají technickým předpisům EEU.		Přístroj třídy ochrany II Přístroj má dvojnásobnou ochrannou izolaci a splňuje tak třídu ochrany II.

 NEBEZPEČÍ	Označuje bezprostředně hrozící nebezpečí. Pokud mu nezabráníte, dojde ke smrti nebo závažným zraněním.
 VAROVÁNÍ	Označuje možné hrozící nebezpečí, Pokud mu nezabráníte, může dojít ke smrti nebo závažným zraněním.
 POZOR	Označuje možné hrozící nebezpečí, Pokud mu nezabráníte, může dojít k lehkým nebo drobným poraněním.
 UPOZORNĚNÍ	Označuje potenciálně škodlivou situaci. Pokud se jí nevyhnete, může dojít k poškození zařízení nebo předmětů v okolí.

